






WIRELESS
BODY COMPOSITION SCALE
WITH A&D MEDICAL HEART TRACK
UC-450BLE

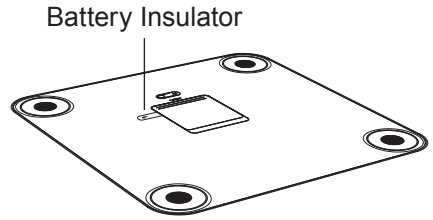

1. The scale comes with batteries pre-installed, please remove the battery insulator for first use.

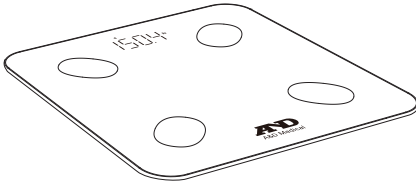

2. To change the units, push and release the set switch. Default is lb.

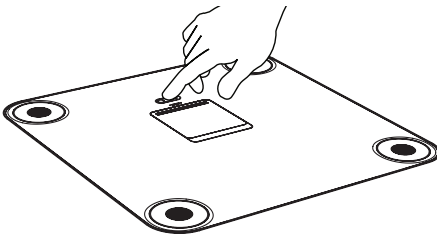

3. Turn on *Bluetooth*[®] settings on your mobile device (smartphone or tablet).
4. Download the free **A&D Heart Track** app from the App Store or Google Play.




GET THE APP

5. Getting started with **A&D Heart Track** app.

Note: the app screens are subject to change based on design improvements.

5a. Set up account. Create a username and password.

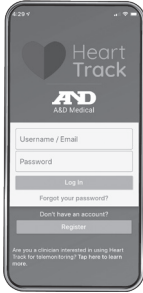

5b. Select Weight Icon.



5c. Click Add Bluetooth®
Weight Scale.



5d. Select UC-450BLE.



5e. Follow onscreen instructions to complete pairing.

Note: tap on scale to wake it up prior to pairing - the LED will light up.


6. Start measuring.

Note: If you take measurements prior to pairing, the date and time might be inaccurate for measurements taken prior to pairing.

6a. Open the A&D Medical Heart Track app.

6b. Place the scale on a flat and stable surface.

6c. Click **+Measure** button on app.

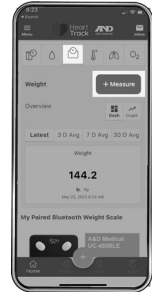


6d. Step on the platform barefooted.

6e. Stand still and keep full contact with the electrodes until the LED stops blinking digits.

Note: Do not step off the scale until the display stops flashing. When the display is no longer flashing, the measurement is complete.



6f. Wait for the scale to transmit measurements to the app.

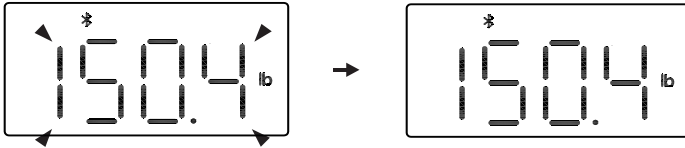

A&D
A&D Medical

1-888-726-9966 | andmedical.com

A&D

A&D Medical

BALANCE


DE COMPOSITION CORPORELLE SANS FIL

AVEC A&D MEDICAL HEART TRACK


UC-450BLE





1. La balance est fournie avec des piles déjà installées; retirez la languette isolante des piles pour commencer à utiliser la balance.

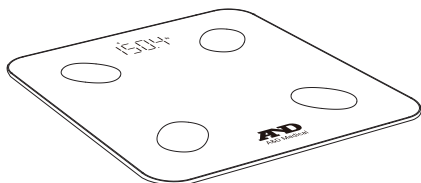

Languette isolante des piles

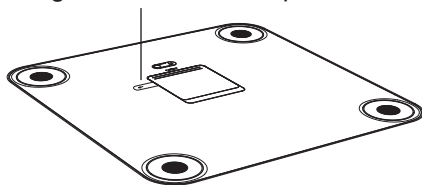

2. Pour modifier l'unité de mesure, enfoncez et relâchez l'interrupteur de réglage. L'unité utilisée par défaut est les livres.

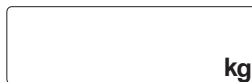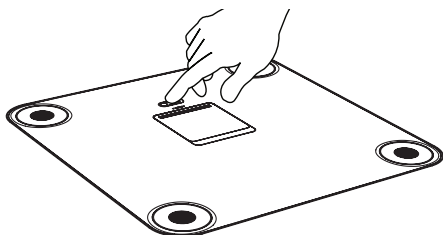

3. Activez le paramètre *Bluetooth*[®] sur votre appareil mobile (téléphone intelligent ou tablette).
4. Téléchargez l'application **A&D Heart Track** gratuite depuis l'App Store ou Google Play.



OBTENIR L'APPLICATION

5. Comment commencer avec l'application **A&D Heart Track**.

Remarque : les écrans de l'application peuvent être modifiés en fonction des améliorations apportées à la conception.

5a. Configurez un compte.
Créez un nom d'utilisateur
et un mot de passe.



5b. Sélectionnez l'icône
Poids.



5c. Cliquez sur Ajouter une
balance Bluetooth®.



5d. Sélectionnez
UC-450BLE.



5e. Suivez les directives à l'écran pour terminer le jumelage.

Remarque : appuyez sur la balance pour la réveiller avant le jumelage - la LED s'allumera.

6. Commencez à effectuer des mesures.

Remarque : si vous prenez des mesures avant le couplage, la date et l'heure peuvent être inexacts pour les mesures prises avant le couplage.

6a. Ouvrez l'application A&D Medical Heart Track.

6b. Posez la balance sur une surface plane et stable.

6c. Cliquer sur le bouton **+Mesure** de l'application.




6d. Montez sur la plate-forme pieds nus.

6e. Restez immobile et gardez un contact intégral avec les électrodes jusqu'à ce que la DEL cesse de faire clignoter des chiffres.

Remarque : ne descendez pas de la balance tant que l'écran n'a pas cessé de clignoter. Lorsque l'écran cesse de clignoter, la mesure est terminée.



6f. Attendez que la balance transmette les mesures à l'application.

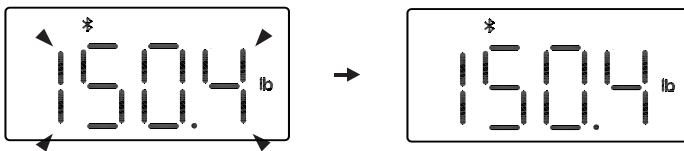

A&D
A&D Medical

1-888-726-9966 | andmedical.com

©2024 A&D Medical. Tous droits réservés. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. iPad, iPhone et iPod sont des marques de commerce d'Apple, Inc. Android et Google Play sont des marques de commerce de Google, Inc. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

UC-450BLE-QSG

A&D

A&D Medical



BÁSCULA

**DE COMPOSICIÓN CORPORAL INALÁMBRICA
CON A&D MEDICAL HEART TRACK**


UC-450BLE



1. La báscula incluye baterías ya instaladas. Retire el aislante de las baterías antes de utilizarla por primera vez.

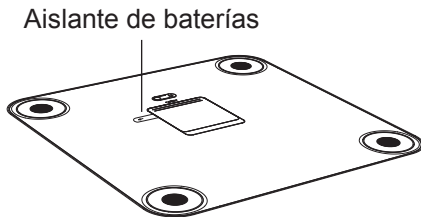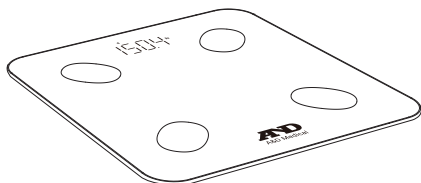

2. Para cambiar las unidades de medida, pulse y suelte el interruptor de ajuste. El ajuste predeterminado es lb.

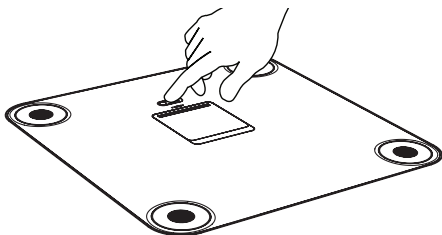

3. Active el *Bluetooth*[®] en los ajustes de su dispositivo móvil (teléfono inteligente o tableta).
4. Descargue la aplicación gratuita **A&D Heart Track** desde la App Store o Google Play.



OBTÉN LA APLICACIÓN

5. Cómo comenzar a utilizar la aplicación **A&D Heart Track**.

Nota: Las pantallas de la aplicación pueden cambiar en función de las mejoras de diseño.

5a. Cree una cuenta. Cree un nombre de usuario y una contraseña.



5b. Seleccione el ícono de peso.



5c. Haga clic en añadir báscula Bluetooth®.



5d. Seleccione UC-450BLE.



5e. Siga las instrucciones en pantalla para completar el emparejamiento.

Nota: Toque la báscula para activarla antes del emparejamiento - el LED se iluminará.


6. Inicie la medición.

Nota: Si toma medidas antes del emparejamiento, es posible que la fecha y la hora sean inexactas en las medidas tomadas antes del emparejamiento.

6a. Abra la aplicación A&D Medical Heart Track.

6b. Coloque la báscula sobre una superficie plana y estable.

6c. Haga clic en el botón **+Measure** (+Medir) en la aplicación.

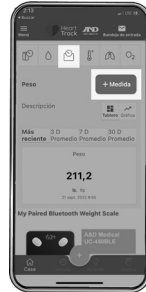


6d. Suba a la plataforma sin calzado.

6e. No se mueva y mantenga pleno contacto con los electrodos hasta que el led deje de parpadear.

Nota: No baje de la báscula hasta que la pantalla deje de parpadear. Cuando la pantalla deje de parpadear, la medición habrá finalizado.



6f. Espere que la báscula transmita las mediciones a la aplicación.

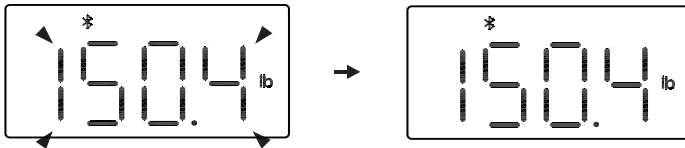

A&D
A&D Medical

1-888-726-9966 | andmedical.com

©2024 A&D Medical. Todos los derechos reservados. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. iPad, iPhone y iPod son marcas comerciales de Apple, Inc. Android y Google play son marcas comerciales de Google, Inc. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

UC-450BLE-QSG