



Medical Technologies


EasyOne Pro/LAB

Test complet de la fonction pulmonaire au chevet du patient

Faire de la place pour l'essentiel en santé pulmonaire.

EasyOne Pro/LAB révolutionne le test de la fonction pulmonaire avec sa gamme de tests complète, son format compact et son interface conviviale. De la spirométrie aux volumes pulmonaires en passant par la DLCO : ses fonctionnalités couvrent un large spectre des besoins diagnostiques dans le domaine de la santé respiratoire.

EasyOne Pro/LAB permet aux professionnels de la santé d'évaluer la fonction pulmonaire de manière efficace, facilitant ainsi le diagnostic, le suivi et le traitement des troubles respiratoires. Sa portabilité, sa facilité d'utilisation et sa précision font de EasyOne Pro/LAB un dispositif adapté à de nombreux contextes cliniques. Concentrez-vous sur l'essentiel dans le domaine de la santé pulmonaire avec EasyOne Pro/LAB.

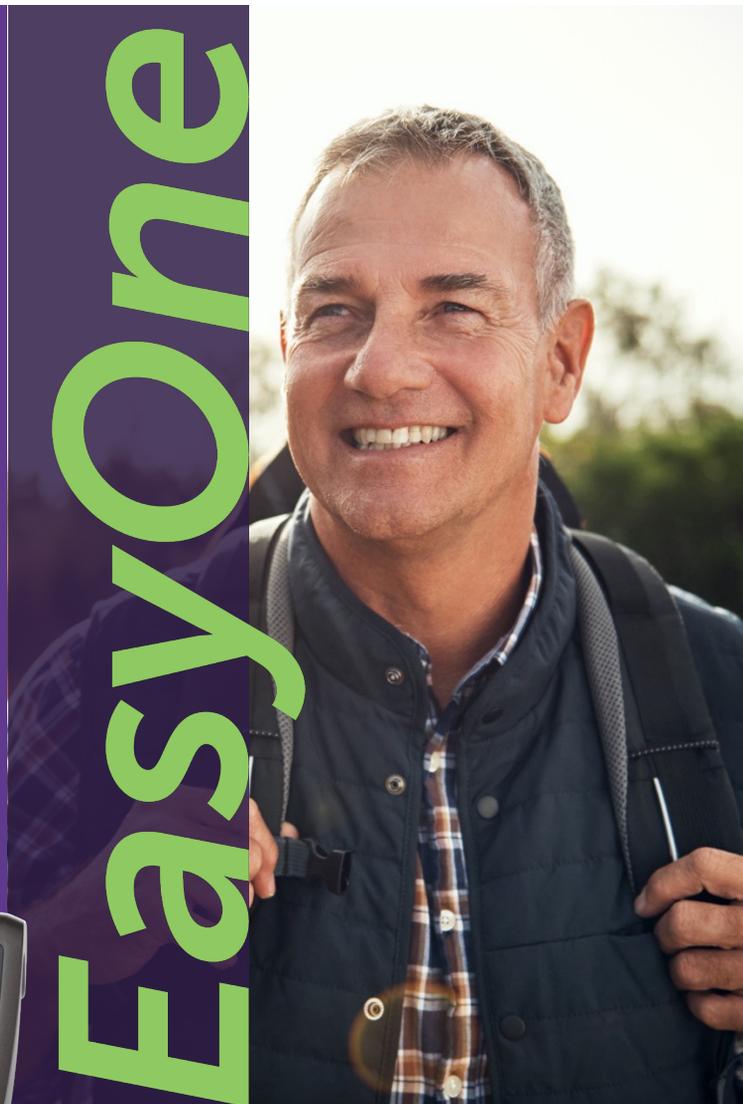

Performances précises



EasyOne Pro

- Spirométrie
- DLCO
- Test de provocation

Volumes pulmonaires

- Dilution à l'hélium en respiration unique

EasyOne Pro LAB

- Spirométrie
- DLCO
- Test de provocation

Volumes pulmonaires

- Rinçage de l'azote en plusieurs respirations



Spécifications

EasyOne Pro: FVC, FVL, SVC, MVV, test de provocation et pré/post-test, DLCO

EasyOne Pro LAB: FVC, FVL, SVC, MVV, test de provocation et pré/post-test, DLCO, MBW, LCI

Langues: allemand, anglais, chinois, croate, danois, espagnol, finnois, français, italien, japonais, néerlandais, norvégien, portugais, russe, suédois, turc, vietnamien

Connectivité DME: HL7, XML, GDT, API avec EasyOne Connect

Normes de spirométrie: conforme aux normes ATS/ERS 2005 et 2019 et NIOSH/OSHA

Normes de DLCO: conforme aux normes DLCO ATS/ERS 2005 et 2017

Dimensions: 27 x 33.5 x 27 cm (H x l x p), 8 kg

Références

3000-1: EasyOne Pro

3100-1: EasyOne Pro LAB

2050-1: Boîte de 50 embouts Spirette

2050-5: Boîte de 200 embouts Spirette

2050-10: Boîte de 500 embouts Spirette
N'est pas disponible dans tous les pays

3050-1: Boîte de 50 filtres DLCO Barriette

3050-2: Boîte de 100 filtres DLCO Barriette

3150-1: Boîte de 40 filtres FRC Barriette
(à utiliser uniquement avec EasyOne Pro LAB)

3150-2: Boîte de 80 filtres FRC Barriette
(à utiliser uniquement avec EasyOne Pro LAB)



ndd Medical Technologies
300 Brickstone Square, Suite 604 Andover, MA, 01810 USA
Tél.: +1-978-470-0923

ndd Medizintechnik AG
Technoparkstrasse 1, CH-8005 Zurich, Suisse
Tél.: +41 44 512 65 00



Fonctionnalités

- Format portable et léger conçu pour les tests au chevet du patient
- Approche centrée sur l'utilisateur pour un fonctionnement intuitif et une accessibilité immédiate sans temps de préchauffage
- Solution hygiénique équipée des consommables Spirette et Barriette, éliminant le risque de contamination croisée
- Ingénierie de précision suisse
- Niveau de maintenance minimal, permettant d'accorder plus de temps aux soins du patient

TrueFlow
makes the difference

La mesure du débit par ultrasons propre à ndd est très précise, quel que soit le débit et peu importe la composition des gaz, la pression, la température et le taux d'humidité.

ndd **TrueFlow** est une solution hygiénique et sans résistance qui ne nécessite aucun calibrage au cours de sa durée de vie.

TrueCheck
automated precision

La méthode brevetée de vérification des performances des dispositifs ndd

- Élimine le besoin en calibrage de gaz ainsi que le besoin en simulateur DLCO externe
- Calibrage à 5 points comprenant stabilité et linéarité des gaz traceurs et capteurs de CO

EasyOne Connect

Le logiciel **EasyOne Connect** offre une base de données et une plateforme pour toutes les solutions EasyOne au chevet du patient. La gestion des données n'a jamais été aussi simple.

