



Medical Technologies

# Easy-on PC

Spiromètre pour PC


## Connecter les patients à des soins pulmonaires précis

Le spiromètre de ndd contrôlé par ordinateur s'associe au logiciel interactif EasyOne Connect pour fournir des résultats rapides, précis et fiables. Avec ses fonctionnalités probantes telles que la visualisation de courbe en direct, les incitations animées et l'intégration avec les systèmes DME/DSE de pointe, Easy on-PC est le choix évident dans le domaine de la spirométrie connectée sur ordinateur.

Grâce à la technologie TrueFlow brevetée par ndd, le calibrage n'est plus nécessaire : un gain de temps réinvesti dans la production de résultats précis et fiables.



# Simple. Certain. Éprouvé.

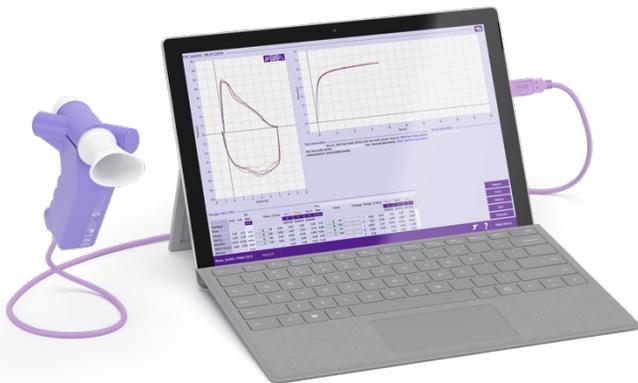

## Écrans d'incitation

Disponible avec le logiciel **EasyOne Connect**



## Spécifications

**Types de test :** FVC, FVL, SVC, MVV et pré/post-tests

**Langues :** chinois, croate, danois, néerlandais, anglais, finnois, français, allemand, italien, japonais, norvégien, portugais, russe, espagnol, suédois, turc, vietnamien

**Connectivité DME :** HL7, XML, GDT, API avec EasyOne Connect

**Normes :** conforme aux normes ATS/ERS 2005 et 2019 et NIOSH/OSHA

**Capacité du disque dur :** Installation/système 1 Go. Données jusqu'à 4 Go

**RAM :** 2 GB

**Compatibilité du logiciel EasyOne Connect :** Windows 7, Windows 8 et 8.1 (32 et 64 bits), Windows 10 (32 et 64 bits), Windows 11

## Références

**2700-3 :** spiromètre Easy on-PC

**2050-1 :** boîte de 50 embouts Spirette

**2050-5 :** boîte de 200 embouts Spirette

**2050-10 :** boîte de 500 embouts Spirette  
N'est pas disponible dans tous les pays



Medical Technologies

ndd Medical Technologies  
300 Brickstone Square, Suite 604 Andover, MA, 01810 États-Unis  
Tél.: +1-978-470-0923

ndd Medizintechnik AG  
Technoparkstrasse 1, CH-8005 Zurich, Suisse  
Tél.: +41 44 512 65 00



## Fonctionnalités

- Incitations animées en temps réel
- Intégration éprouvée avec les principaux systèmes DME/DSE
- Tendence des résultats à long terme
- Retour et interprétation de qualité automatisés
- Interface logicielle intuitive
- Test de provocation intégré avec protocoles personnalisables
- Large spectre de valeurs théoriques à sélectionner
- Technologie sans calibrage

**ndd TrueFlow**  
makes the difference

La mesure du débit par ultrasons propre à ndd est très précise, quel que soit le débit et peu importe la composition des gaz, la pression, la température et le taux d'humidité.

ndd **TrueFlow** est une solution hygiénique et sans résistance qui ne nécessite aucun calibrage au cours de sa durée de vie.

## EasyOne Connect

Le logiciel **EasyOne Connect** offre une base de données et une plateforme pour toutes les solutions **EasyOne** au chevet du patient. La gestion des données n'a jamais été aussi simple.

